

AIR CUSHION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- [1] Air Cushion
- [2] Сетевой адаптер
- [3] Автомобильный адаптер 12V

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению, указанному на штепсельной вилке. Присоедините кабель к прибору, если Вы этого ещё не сделали, затем вставьте вилку в сеть. После этого включите прибор при помощи кнопок управления.

УПРАВЛЕНИЕ

[1] Power (Вкл./Выкл.)

Нажмите на кнопку ВКЛ. для приведения в режим готовности функций вибрация и прогрев.

[2] Mode (Режим вибрации)

С помощью этой кнопки, Вы можете выбрать одну из трех программ массажа.

[3] Heat (Прогрев)

С помощью данной кнопки, Вы можете дополнительно усилить функцию массажа с помощью тепла.

[4] Air Pump (Воздушный насос)

При помощи этой кнопки, Вы можете наполнить накидку воздухом для наиболее оптимального соприкосновения с вашим телом.

[5] Клапан

При нажатии на эту кнопку, весь накаченный ранее воздух, будет спущен обратно.


ХРАНЕНИЕ / УХОД

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенным от пыли месте с размотанным кабелем.

2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение

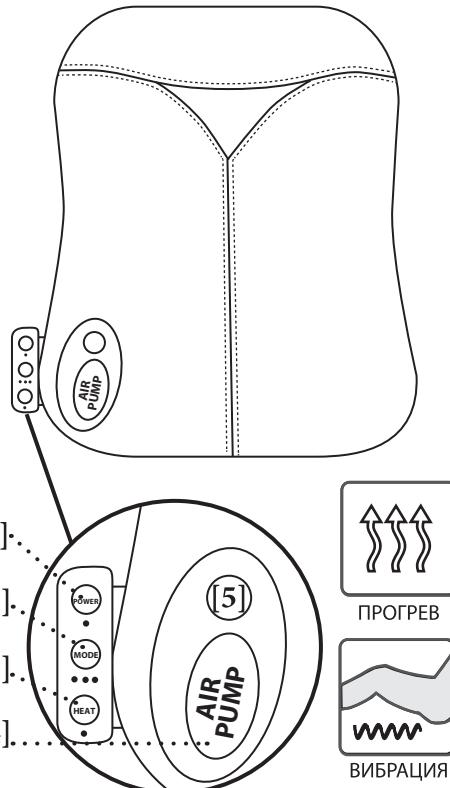

всего времени эксплуатации.

• Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.

• Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.

• Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

• Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.

- Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром взрослых.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не

нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.

• Любой массаж, даже массаж ступней противопоказан, если Вы беременны или если область массажа подвержена одному из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.

Если Вы используете электронные приборы, например сердечный стимулятор, каждый раз перед массажом Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
<ul style="list-style-type: none"> • Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт дистанционного управления не работают. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте присоединение к сетевому кабелю. • При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-40 минут.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 58,5 x 44,5 x 4,5 см

Номинальная мощность: 12 Ватт

Напряжение: AC 220 В~50/60 Гц 12В, 1A

Вес: 0,7 кг.

Сертификаты:



Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH» они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.

Casada International GmbH. Все права защищены.