


# TWIST

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Twist
- Сетевой адаптер
- Автомобильный адаптер 12V

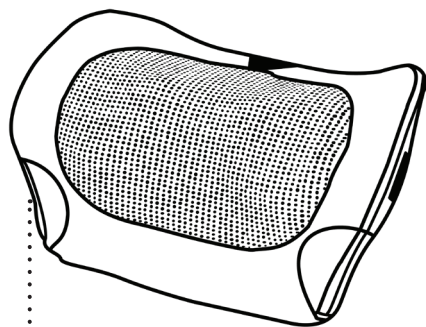

[1]

### УПРАВЛЕНИЕ

#### [1] Вкл. / выкл.

- Используйте данную кнопку для включения Twist.
- Функция массажа / шиацу включится, а функция подогрева активируется.
- Для выключения Twist еще раз нажмите на данную кнопку.

### НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению, указанному на штепсельной вилке. Если да, то присоедините сетевой адаптер к массажеру и вставьте штепсельную вилку в розетку.

С помощью автомобильного адаптера Вы также можете использовать Twist во время путешествий (**не во время поездки на автомобиле**). Просто вставьте автомобильный адаптер в прикуриватель.

### ФУНКЦИИ



РАЗМИНАЮЩИЙ  
МАССАЖ



ПРОГРЕВ

#### РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ (ШИАЦУ)

Четыре эргономично расположенные массажные головки Twist массируют приятными круговыми движениями выбранную область тела. Благодаря включаемой функции подогрева мышцы согреваются и уже в течение первых минут Ваше тело охватывает неповторимое приятное ощущение.

Регулярный массаж с помощью Twist стимулирует функции нервных путей и активизирует обмен веществ. Кровоснабжение улучшается, а напряжение мышц снимается. Это может оказывать положительное влияние на блокады и нарушения работы внутренних органов.

Кто однажды попробовал массаж шиацу, навсегда запомнит его благотворное действие. При этом совершенно неважно, проводился ли он для профилактики заболеваний или для расслабления и активизации жизненной энергии.

В данном методе массажа объединились традиционные знания восточной медицины и современные методы лечения. Массаж шиацу — это расслабление, жизненная сила и регенерация организма. Помимо этого, он оказывает успокаивающее действие при стрессе и улучшает общее самочувствие.

#### ПРОГРЕВ

Функция подогрева позволяет сделать массаж более качественным. Эта функция позволяет расслабить мышцы и улучшить кровообращение.

Twist — это практичная и гибкая массажная подушка, которая мягко расслабит мускулатуру и окажет быструю помощь уставшему телу. При этом Вам не потребуется даже вставать с дивана или кресла. Создайте оазис блаженства в собственном доме, позвольте массажу растворить Ваш ежедневный стресс и вернуть гармонию души и тела.

### ХРАНЕНИЕ / УХОД

С помощью регулярного ухода Вы продлите срок службы Вашего Twist и одновременно обеспечите его надежную работу.

1. Рекомендуемые условия хранения: в сухом месте, защищенном от пыли.
2. Храните Twist вдали от жидкостей или открытого огня.
3. Протирать массажер сухой мягкой салфеткой.
4. Если Вы не используете Twist, отсоедините его от электросети.

### ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни панель управления не работают.	Проверьте присоединение к адаптеру. При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-50 минут.

### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 33 x 23 x 15 см

Масса: 2 кг

Номинальная мощность: 19,2 Вт

Напряжение:

- Вход: Адаптер: AC 200-240 В, ~ 50 Гц, 0,8 А
- Выход: DC 12 В, 2500 мА

Сертификаты:



### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Массажер соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 30 минут.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
- Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности или, если области массажа (одна или несколько) подвержены любому из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH» они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2013 г.  
Casada International GmbH  
Все права защищены.

